

Benefícios

Para o Montador:

- encaixe simples
- ajustamento fácil usando-se tubos intermóveis
- tubos mais compridos podem ser encaixados para acomodar um alinhamento melhor
- todas as peças do colarinho estão disponíveis para a reposição

Para o utente e/ou Responsável:

- O colarinho é leve e confortável
- fácil de colocar e remover
- perfil modesto; aparência sem obstrução
- fácil de limpar (água e sabão)
- medida do apoio de acordo com a necessidade do utente

Indicações

O CollarTOT é usado no tratamento conservador de crianças de 4 meses ou mais com o torcicolo congênito muscular que apresentam uma inclinação de cabeça consistente de 5 graus ou mais. A criança necessita ter um ROM adequado e uma reação de endireitamento lateral correta (controle de cabeça e força) para levantar sua cabeça distante da lateral do colarinho.

Refêrencias:

Para mais leitura e exemplos clínicos

“Órtese Tubular para Torcicolo (TOT): Uma nova abordagem para a Correção de inclinação de cabeça no torcicolo congênito muscular”
“Mosterman [Et al B.C.H.R.F. Estudo 1985-1986] (cópias abstratas disponíveis)

“Os Determinantes da duração do tratamento para o Torcicolo muscular congênito” - Emery, C. Fisioterapia - Vol. 74, n° 10, de outubro de 1994, pp 921-929

“Torcicolo: diagnóstico diferencial, avaliação e tratamento, Cirurgia Gestação e Órtese ISBN “0-7890-0317-1 Karen Karmel Ross; Publicado pela Haworth Press

Sobre o Torcicolo

Geralmente o Torcicolo congênito muscular é descoberto nas primeiras 6 à 8 semanas de vida. Ele é caracterizado pela redução ou contração excessiva do músculo esternocleidomastóideo no pescoço, causando assim com que a cabeça flexione lateralmente em direção ao lado afetado e rodado para o ombro do lado oposto. Se não for corrigido esta postura pode levar a plagiocéfalia e alta escoliose torácica.

O Collar TOT

Um ciclo de tubos de PVC flexível é superada por dois tubos curtos de nylon. Diversos tamanhos de tubos são embalados com o colarinho. Esses tubos são posicionados anterior e posterior à crista do trapézio. Os tubos de PVC são presos com uma correia(pulseira) de conexão. Uma pulseira extra de Velcro vem incluído com o pacote. O Collar TOT não é tóxico e pode ser lavado.

Escolhendo o Tamanho Correto

O tamanho infantil (TOT01) serve para crianças de 4 meses até 10 anos.

O tamanho adulto (TOT02) serve para crianças de 10 anos até adulto.



Mais produtos finos da Symmetric Designs

Órteses de cotovelo e joelho



O Collar Headmaster



Encosto para cadeira de rodas



www.symmetric-designs.com

O Collar TOT



Para o Torcicolo Congênito Muscular

O Collar TOT foi desenhado para providenciar um estímulo nocivo ao aspecto lateral do crânio. O usuário afasta-se em direção contrária a este estímulo, causando assim com que uma nova posição correta seja adoptada. A adopção de uma posição corrigida da cabeça providencia a habilidade de adaptação de uma percepção horizontal e assim manter a posição correta da cabeça. O CollarTOT vem pre-montado e pronto para ser adaptado.



Symmetric Designs

125 Knott Place, Salt Spring Island, BC V8K 2M4, Canada

email: sales@symmetric-designs.com

www.symmetric-designs.com


Tel: 250-537-2177 Fax: 250-537-1998

Instrução de Ajuste

O colarinho vem pre-montado e pronto para ser adaptado. O tubo de pvc transparente é fornecido com uma medida de duas vezes a circunferência do pescoço, além de mais 10-15 centímetros. Ele é anexado por um conector de extremidade.



Os tubos brancos ou escoras são selecionados de acordo com o tamanho da inclinação da cabeça. O tubo A se estende da crista do trapézio posterior ao osso occipital.

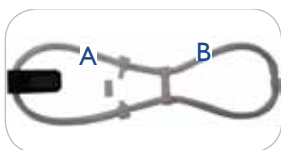

O tubo B vai apartir da crista do trapézio anterior até a ponta do processo mastóide. Evite pressão na mandíbula.



Os tubos são curtos à princípio, depois são substituídos por tubos mais longos uma vez que a correção foi atingida. Se a inclinação da cabeça for muito significativa use os tubos mais curtos inicialmente.

Para o ajuste correto, a criança deve estar segurando a sua cabeça na linha média, ligeiramente afastado das escoras, e deve haver pelo menos espaço suficiente para um dedo adulto encaixar entre o tubo de pvc transparente e o pescoço.

Ajustar o colarinho com um pouco de folga à princípio, para ter certeza de que os tubos laterais são do tamanho correto e estão do lado certo. Aperte a gola com as mãos para verificar se o ajuste esta correto.



CUIDADO: Não deixe a criança sozinha quando estiver usando este Collar TOT!

Remova o colarinho da criança. Puxe pelo tubo de pvc transparente para remover o excesso. Apare este tubo no comprimento correto com uma tesoura e reconecte os tubos com o conector de extremidade. Repor o colarinho depois de cada corte para verificar se o tamanho esta correto.



Nota: Tenha cuidado para não cortar demais o tubo transparente. O tubo não poderá ser reconectado se o cortar muito curto.

Finalmente

- Assegurar que os tubos brancos estão posicionados em relação à crista do trapézio
- Certifique-se que os pais ou responsável pode posicionar o Collar(colarinho) corretamente-marque o início do colarinho se for necessário
- Verifique se há vermelhidão na criança onde os tubos rígidos tocam a pele
- O colarinho pode ser revestido por uma meia fina de nylon para maior conforto



Para o melhor resultado use o Collar TOT por tempo prolongado

Usando o Collar TOT

- ✓ Coloque o colarinho em volta do pescoço
- ✓ Posicione os tubos brancos e encaixe a alça
- ✓ Verifique o ajuste para que não haja indevida pressão em nenhum ponto
- ✓ Lave o Collar com água e sabão regularmente
- ✓ **Remova o Collar TOT quando o utente estiver dormindo!!**

Não deixe a criança sozinha enquanto estiver usando o colarinho.

A Symmetric Designs nao aceita responsabilidade nenhuma de resultados derivados da aplicação errônea deste produto.