

### Voor de installateur:

- eenvoudig op maat te maken (de hoofdsteen is makkelijk te vervormen met de hand)
- te bevestigen met drie punten
- optioneel gebruik van de hoofdband (inclusief voor steun aan de voorkant)
- de pads kunnen eenvoudig met de hand gevormd worden als de drager een andere houding aanneemt.

### Voor de drager en / of zorgverlener:

- een koele en comfortabele hoofdsteen, het design zorgt voor luchtcirculatie
- eenvoudig in gebruik
- onopvallende verschijning
- makkelijk schoon te houden (met water en zeep)
- voor totale controle van het hoofd
- lage warmte-isolatie

### Maten en kleuren



- Verkrijgbaar in de maten Volwassen, Small en Kind
- Momenteel enkel verkrijgbaar in zwart

### Side Pad

#### Part # SAVANT-SP

Deze steun kan ook gebruikt worden als schakelaar



### Whitmyer/Stealth Adaptor

#### Part # SAVANT-WA

Deze adapter maakt het mogelijk om de Savant te monteren op een 19 mm bal Whitmyer en een 17 mm bal Stealth.



### Netti Adaptor

#### Part # SAVANT-NA

Deze adapter maakt het mogelijk om de Savant te monteren op het Netti systeem



### R82 Adaptors


Deze adapters maken het mogelijk dat de R82 headrests en hardware passen op de Axion, Savant Headrest en Twin Hardware.



### Twin Headrest Hardware

#### Part #TWIN HH

Deze hardware zorgt ervoor dat de Axion 6025 en Axion 9025 past op de achterkant van de rolstoel.

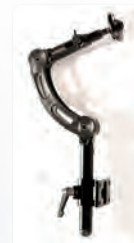

Emergo Europe  
Molenstraat 15, 2513  
BH The Hague, The Netherlands



[www.symmetric-designs.com](http://www.symmetric-designs.com)



## Een hoofdsteen voor de rolstoel voor totale controle van het hoofd

**De Savant Headrest™** is een nieuwe en unieke ondersteuning voor het hoofd. Het is koel, licht van gewicht en kan makkelijk met de hand gevormd worden. Het biedt ondersteuning op drie niveaus voor zijwaartse buiging en rotatie controle. Een hoofdband kan gebruikt worden voor steun aan de voorkant van het hoofd.



# Instructies montage

## Instructies montage

The Savant is verkrijgbaar in drie maten

- Volwassen
- Small
- Kind



## Maatvoering: bij de patient

Omtrek van het voorhoofd	Inches	cm
Volwassen	22 - 24	56 - 61
Small	18 - 22	46 - 56
Kind	14 - 18	36 - 46
Maatvoering: bij de patient		
Volwassen	8 - 9	20 - 30
Small	6 - 7	15 - 18
Kind	5 - 6	13 - 15

## Maatvoering: aan de hoofdsteun

Afstand binnenkant bovenste steun	Inches	cm
Volwassen	14	36
Small	12	30
Kind	9	23
Afstand binnenkant middelste steun		
Volwassen	8	20
Small	7	18
Kind	5	13
Hoogte van de hoofdsteun		
Volwassen	6	15
Small	5	13
Kind	4.5	12



De Savant bestaat uit een unieke stalen kern dat makkelijk vervormbaar is zonder gereedschap.



De montageschijf bestaat uit een 25mm bal. De schijf kan worden verwijderd om aangepaste hardware met M5 schroeven te bevestigen.

Netti, Whitmyer and Stealth hardware adapters zijn verkrijgbaar.



De Savant wordt geleverd met een hoofdband dat zorgt voor steun aan de voorkant van het hoofd. De Savant kan met of zonder hoofdband gedragen worden.

## Funties

**De Savant Headrest™** is een nieuwe en unieke ondersteuning voor het hoofd. Het is koel, licht van gewicht en kan makkelijk met de hand gevormd worden. Het biedt ondersteuning op drie niveaus voor zijwaartse buiging en rotatie controle.

Een hoofdband kan gebruikt worden voor steun aan de voorkant van het hoofd.

- Extra hoofdband geeft voorste steun
- Makkelijk te openen klemmen houden de hoofdband op de plaats



- Hoge laterale pads geven effectieve lateroflexie controle
- Mid-lateral pads zijn gevormd voor comfort achter de oren
- Sub-occipitale pads zorgen voor extra ondersteuning aan de onderkaak
- De pads zijn gevuld met zachte gel wat zorgt voor meer comfort
- De Savant is bedekt met nylon en lycra

**Symmetric Designs aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van onjuiste toepassing van dit product.**