

Componentes Individuales


Beneficios

Componentes Individuales (Tornillos incluidos)		
Pieza #	A	
	in	cm
CUFF 12	12	30
CUFF 11	11	28
CUFF 10	10	25
CUFF 9	9	23
CUFF 8	8	20
CUFF 7	7	18
CUFF 6	6	15
CUFF 5	5	13
CUFF 4	4	10
CUFF 3	3.5	9



La medida de la muñequera es la mitad de la circunferencia de la extremidad. Por ejemplo un CUFF7 le queda a una extremidad de 14" de circunferencia.

Barras laterales (pares)		
Pieza #	L	
	in	cm
BAR 19	19	48
BAR 17	17	43
BAR 15	15	38
BAR 13	13	33
BAR 11	11	28
BAR 09	9	23
BAR 07	7	18
BAR 05	5	13

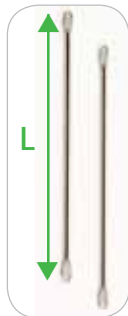

Estas barras pulidas y de acero inoxidable se proporcionan en pares.

Rodilleras y Coderas				
Pieza #	b		c	
	in	cm	in	cm
PAD60	6	15	7	18
PAD50	5	13	6.5	17
PAD45	4.5	12	6	15
PAD40	4	10	5	13
PAD35	3.5	9	4	10



Los cojines son suaves y se ajustan a la forma del miembro. La banda de velcro se puede recortar al largo requerido.

Serie de extensiones para rodilla y codo

- Se ajustan a un amplio rango del ángulo de las articulaciones.
- Se ajustan diariamente para un manejo efectivo en serie
- Fácil y rápido de aplicarlas
- Delgadas, discretas y frescas de usar

Estas ortesis están especialmente diseñadas para un manejo en serie, de contracturas de flexión en la rodilla y codo.

Estas ortesis son delgadas, ligeras y estables en los miembros. Están diseñadas para uso no ambulatorio. Uselas con un programa de estiramiento para mejores resultados.



Estas muñequeras son únicas ya que son pre moldeadas, fácil de doblar y ajustar manualmente a la forma deseada. Además de que la muñequera sujeta el miembro cómodamente, el acanalado interno permite la circulación del aire. Todas las piezas son intercambiables para ajustarse a la medida.

Más Productos Finos de Symmetric Designs

Collarín
Headmaster



Collarín
TOT



Descansos para
cabeza para silla
de Ruedas.



Symmetric Designs

www.symmetric-designs.com



Serie Canadiense De Ortesis de Rodilla y Codo



Serie de Ortesis para la Rodilla y para el Codo

Estas Innovadoras Ortesis son para manejo en serie de contracturas de flexión del codo y rodilla. Son apropiadas para un amplio rango de discapacidades neuromusculares y ortopédicas. Las Ortesis aplican una fuerza de extensión firme y fuerte a través del cojín. Simplemente se ajustan las bandas.



Symmetric Designs

www.symmetric-designs.com

Instrucciones

El miembro debe extenderse tanto como sea posible antes de colocar la ortosis. La distancia de la parte alta del brazo y la parte baja del brazo se debe medir en esta posición. (Para la rodilla mida de media cadera a media espinilla con el miembro tan extendido como sea posible). Esta distancia establece el largo de la barra lateral.

La circunferencia debe medirse del punto medio alto y medio bajo del miembro. La medida de la muñequera es la mitad de esa circunferencia. Por ejemplo, una muñequera 7 le queda a un miembro de circunferencia de 14”.

La medida del cojín para rodilla o Codo deberá ser entre las tallas de la muñeca.

La ortosis debe colocarse extendiendo el miembro tan extendido como sea posible pero hasta donde sea cómodo. Las bandas para los cojines de la rodilla o codo deberán ajustarse y el exceso deberá recortarse. Las bandas deben ajustarse conforme la contractura de la flexión va reduciéndose.



Para crear a un diseño de series de Orthosis

Seleccione los componentes de los siguientes elementos individuales de la tabla. Cada Ortesis requiere un púno distal y uno proximal, basada en las medidas del miembro. Cada Ortesis requiere también dos barras laterales, basadas en las medidas de “L”, y un cojín.

Ortesis de Codo



Estándar de Medias

Modelo	Talla	Circunferencia Antebrazo-medio (cm)	Circunferencia Bíceps-medio (cm)
ELB01	Grande	23 - 28	28 - 33
ELB02	Mediano	18 - 23	23 - 28
ELB03	Chica	15 - 20	18 - 23
ELB04	Infantil	13 - 18	15 - 20

Las Ortesis estándar de codo están ensamblados usando los componentes listados abajo.

Modelo	Barras laterales	Proximal	Distal	Cojín
ELB01	BAR11	CUFF6	CUFF5	PAD45
ELB02	BAR09	CUFF5	CUFF4	PAD40
ELB03	BAR07	CUFF4	CUFF3	PAD40
ELB04	BAR05	CUFF3	CUFF3	PAD35

Estándar de medidas

Ortesis para rodilla



Estándar de Medias

Modelo	Talla	Circunferencia Pantorrilla media (cm)	Circunferencia Muslo medio (cm)
KE001	Grande	38 - 43	48 - 53
KE002	Mediano	33 - 38	43 - 48
KE003	Chica	28 - 33	38 - 43
KE004	Junior	23 - 28	33 - 38
KE005	Niño	18 - 23	28 - 33

Las Ortesis estándar de rodilla están ensamblados usando los componentes listados abajo.

Modelo	Barras laterales	Proximal	Distal	Cojín
KE001	BAR15	CUFF10	CUFF8	PAD60
KE002	BAR13	CUFF9	CUFF7	PAD50
KE003	BAR11	CUFF8	CUFF6	PAD50
KE004	BAR09	CUFF7	CUFF5	PAD45
KE005	BAR07	CUFF6	CUFF5	PAD45

Estándar de medidas