

El Savant

Equipo para Montaje de Soportes

Un soporte para cabeza para un control total de la cabeza



El Soporte para cabeza Savant, es un soporte nuevo único para la cabeza. Es fresco, ligero y puede moldearse fácilmente de manera manual. Proporciona apoyo a tres niveles diferentes en la cabeza para controlar la flexión lateral y la rotación.

Una banda para la cabeza puede usarse para soporte anterior.



Características

- Almohadillas laterales altas le brindan un control efectivo de flexión lateral
- Almohadillas laterales medias están diseñadas para brindar comodidad detrás de los oídos.
- Almohadillas sub-occipitales brindan soporte extra debajo de la mandíbula
- El diseño sencillo de la banda para la cabeza brinda soporte anterior
- Abrazaderas fáciles de desabrocharse mantienen la banda para la cabeza en su lugar. Se desabrochan fácilmente para ajustarse con precisión
- Las almohadillas están rellenas con un gel suave para brindar una mayor comodidad
- El Savant está recubierto con un material de tejido suave y durable de nylon/lycra.

Equipo para Montaje HRHCO

El equipo del soporte para cabeza tiene incorporada una bola de acero de 1" (25mm) permitiendo ajustes universales. El equipo está recubierto con un terminado durable de nylon que conserva su apariencia durante más tiempo.

Este Ensamble para equipo puede usarse con los soportes para cabeza mostrados en la hoja de encima, con el soporte de control total Savant, y con cualquier otro soporte para cabeza, que acepte una bola de 1" (25mm).



Adaptador Whitmyer

Parte # SAVANT-WA

Este adaptador admite todos los soportes para cabeza, incluyendo el Savant, el cual puede ajustarse a una bola de 3/4" (19mm) en el equipo de montaje Whitmyer



Adaptador Netti

Parte # SAVANT-NA

Este adaptador permite colocar todos los soportes para cabeza al equipo de montaje Netti incluyendo el Savant



Más productos finos de Diseños Symetric

Ortosis para Rodilla y Codo



Collarin TOT



Collarin Headmaster



Soportes para Cabeza para Sillas de Ruedas y Equipo



Productos de Hule Espuma de Alta Calidad

Estos soportes para cabeza para silla de ruedas están hechos de hule espuma de alta calidad altamente resistente a rasgaduras. Una inserción de metal a todo lo largo apoya totalmente la parte posterior del descanso para cabeza. El acabado durable y texturizado permite una limpieza fácil con jabón suave y agua.

Nuestro equipo estándar de montaje de tres-puntos puede usarse con esos soportes para cabeza. Una variedad de adaptadores se encuentran disponibles.



Symmetric Designs

125 Knott Place, Salt Spring Island, BC V8K 2M4, CANADA

email: sales@symmetric-designs.com

www.symmetric-designs.com

Tel: 250-537-2177 Fax: 250-537-1998


www.symmetric-designs.com



Escoja el Soporte para cabeza que mejor le acomode de acuerdo a sus necesidades....


Soporte para Cabeza Grande - WCH01

- contorneado para un apoyo occipital más cómodo
- bordes anchos para aumentar el apoyo lateral
- alas bajas redondeadas para un buen contacto ocular
- contorneado alrededor de los oídos

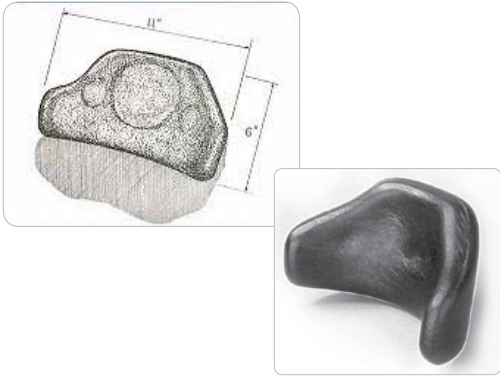

Soporte para Cabeza de Combinación Pequeña - WCH03

- forma anatómica para control de flexión lateral
- mayor control intimo alrededor
- extenso control lateral en el área cervical
- libertad máxima en el área de los oídos

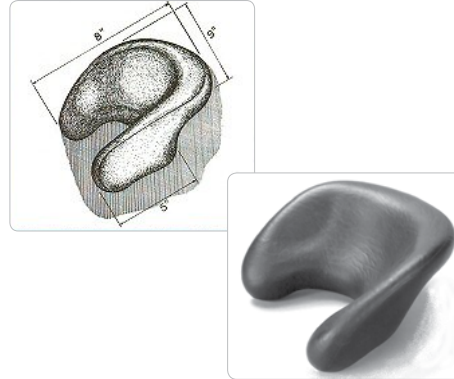


Almohadilla para Soporte lateral - WCH05

- diseñado para soporte del tronco
- puede usarse como descanso para cabeza cuando se desea un soporte o contacto mínimo




Soporte para Cabeza de Combinación Estándar - WCH02

- puntas cuadradas amplias para mayor apoyo lateral
- mayor profundidad para estabilizar la cabeza
- apoyo profundo contorneado para el área occipital
- laterales bajas amplias para prevenir atoramiento

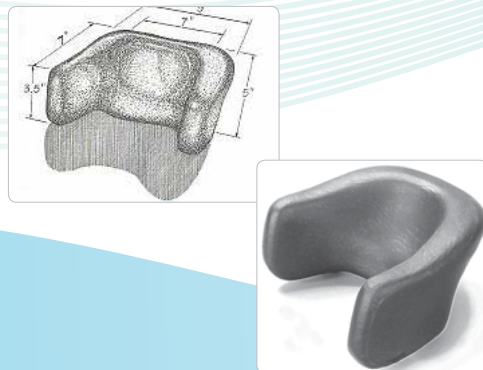

Soporte para Cabeza Pequeño - WCH04

- para un soporte mínimo, útil de transportarse
- soporte cómodo para las occipitales
- máxima libertad para los oídos

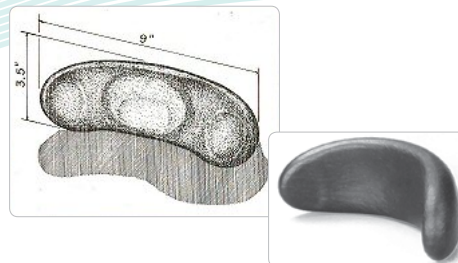

Soporte para Cabeza para Apoyo Completo - WCH06

- diseñado para un soporte integral de la cabeza
- almohadillas laterales altas brindan soporte temporal
- almohadillas bajas brindan control de rotación
- fácilmente moldeable de forma manual para un ajuste mas preciso



Todos los soportes para cabeza pueden limpiarse fácilmente con jabón suave y agua. Todos ellos se pueden montar a una bola de 1" (25mm) y a equipos Whitmeyer y Netti con adaptadores.