




Free Form Seating

complejos asientos personalizados, simplificados

Free Form Seating ofrece un respaldo ajustado a medida que cambiará conforme a las necesidades posturales de una persona. Este sistema adaptable brinda al montador la capacidad de contornear el armazón conforme a las necesidades exactas del usuario. A medida que una persona gane o pierda peso, a medida que una persona desarrolle una necesidad de más o menos apoyo y a medida que las personas jóvenes crezcan, esta solución de asiento se adaptará.

Free Form Seating es un verdadero sistema de asiento personalizado que puede montarse y modificarse en cualquier parte y en cualquier momento.

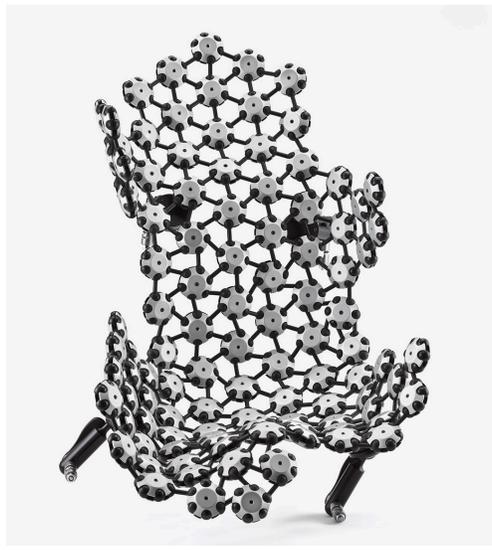

Por qué funciona:

- Diseño 3D moldeable para lograr una distribución uniforme de presión y la capacidad de aumentar el apoyo en cualquier parte del armazón
- Posicionamiento fácilmente ajustable para adaptarse a una cifosis, escoliosis y otras necesidades de apoyo postural
- Aumente o disminuya con facilidad el tamaño de los laterales mediante la adición o la extracción de abrazaderas
- Ángulo, profundidad y altura ajustables
- Cubierta transpirable y lavable
- Disponible en 3 tamaños premoldeados, configuraciones personalizadas o láminas completas para lograr montajes en cualquier forma
- Las opciones incluyen un soporte de montaje universal para reposacabezas, cubiertas adicionales y componentes del armazón
- Accesorios de desacoplamiento rápido para soporte central o soporte independiente
- Las abrazaderas de aluminio y bolas de unión de nylon reforzadas con vidrio proporcionan un armazón extremadamente fuerte. El sistema está diseñado para tener una pequeña cantidad de flexibilidad para absorber vibraciones y proporcionar una sensación dinámica sin dejar de ser de apoyo

